

SOROTECA

8.1. Amostras


Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

Trata-se de um tipo de controle de estoque, cujo objeto a ser armazenado e controlado, são tubos de ensaio e suas estantes.


8.1.1. Criar

A seguir será apresentado o caminho lançar as amostras na soroteca. Uma vez feita a triagem e os exames, as amostras são colocadas na estante para armazenamento.

1) Acessar o **Módulo Soroteca.**

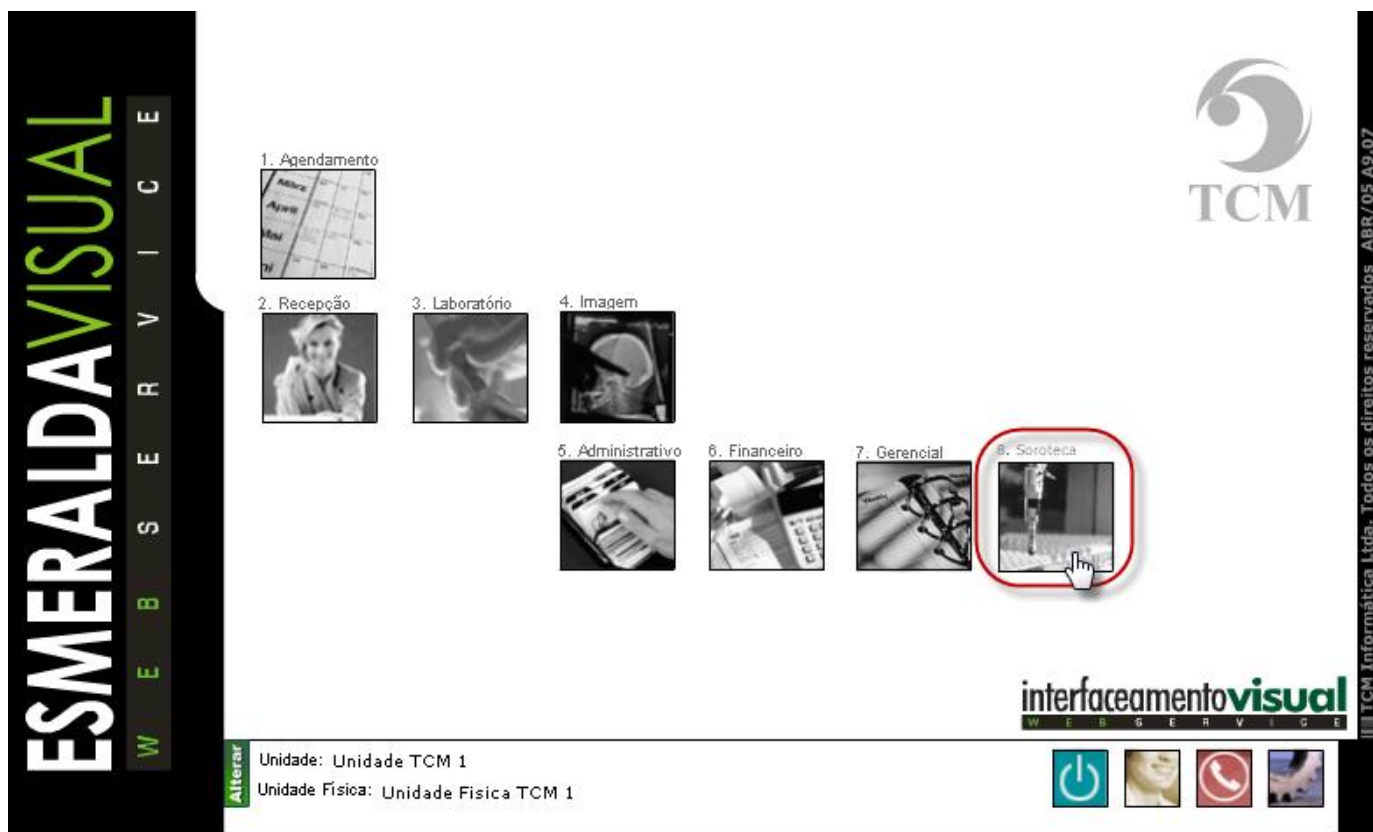

2) Clicar em **Amostras**.

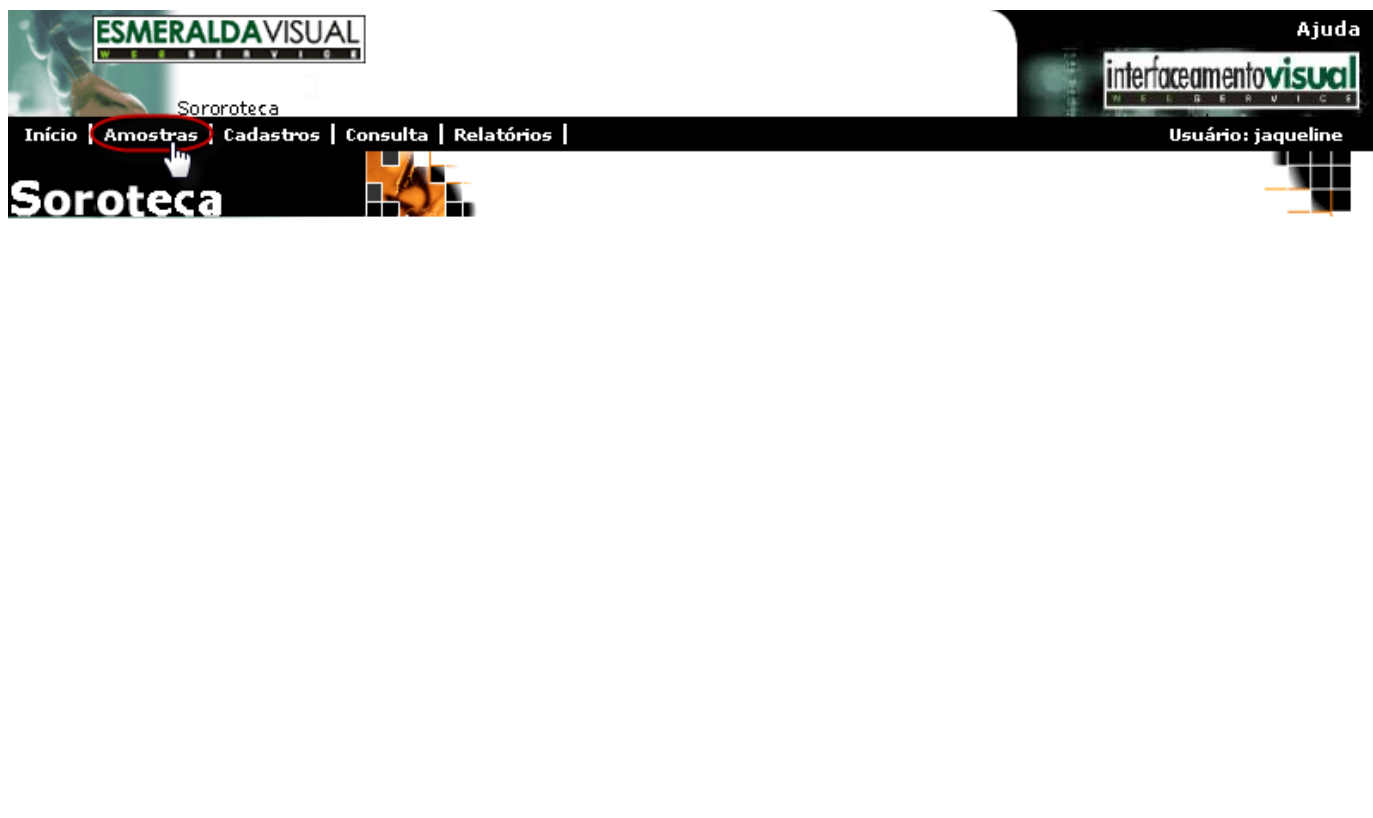

3) Clicar em Criar.



The screenshot shows the 'Sorroteca' module interface. At the top, there are logos for 'ESMERALDA VISUAL' and 'interfaceamento visual'. Below the logos is a navigation bar with 'Início', 'Amostras', 'Cadastros', 'Consulta', and 'Relatórios'. The 'Amostras' menu item is active. On the left side, there is a vertical menu with three options: 'Criar', 'Colocar na geladeira', and 'Desprezar'. The 'Criar' option is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The main content area is titled 'Amostras' and contains a list of tasks and a text box with instructions.

Amostras


Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes. Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

4) Clicar em Cadastrar.

The screenshot shows the ESMERALDA VISUAL Sorroteca interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Amostras', 'Cadastros', 'Consulta', and 'Relatórios'. The user is logged in as 'jaqueline'. The left sidebar has a 'Criar' section with buttons for 'Cadastrar', 'Colocar na geladeira', and 'Desprezar'. The 'Cadastrar' button is highlighted with a red circle and a mouse cursor. The main content area is titled 'Amostras' and contains a text box with the following text:

Neste módulo estão concentradas as rotinas de: lançamento dos tubos nas estantes, Desprezo dos tubos vencidos e gerenciamento físico das geladeiras: entende-se isto pelo descarte das amostras desprezadas e a guarda das estantes lançadas.

5) Ao clicar em **Cadastrar**, abrirá uma tela para informar onde as amostras serão armazenadas. Seguir instruções abaixo.

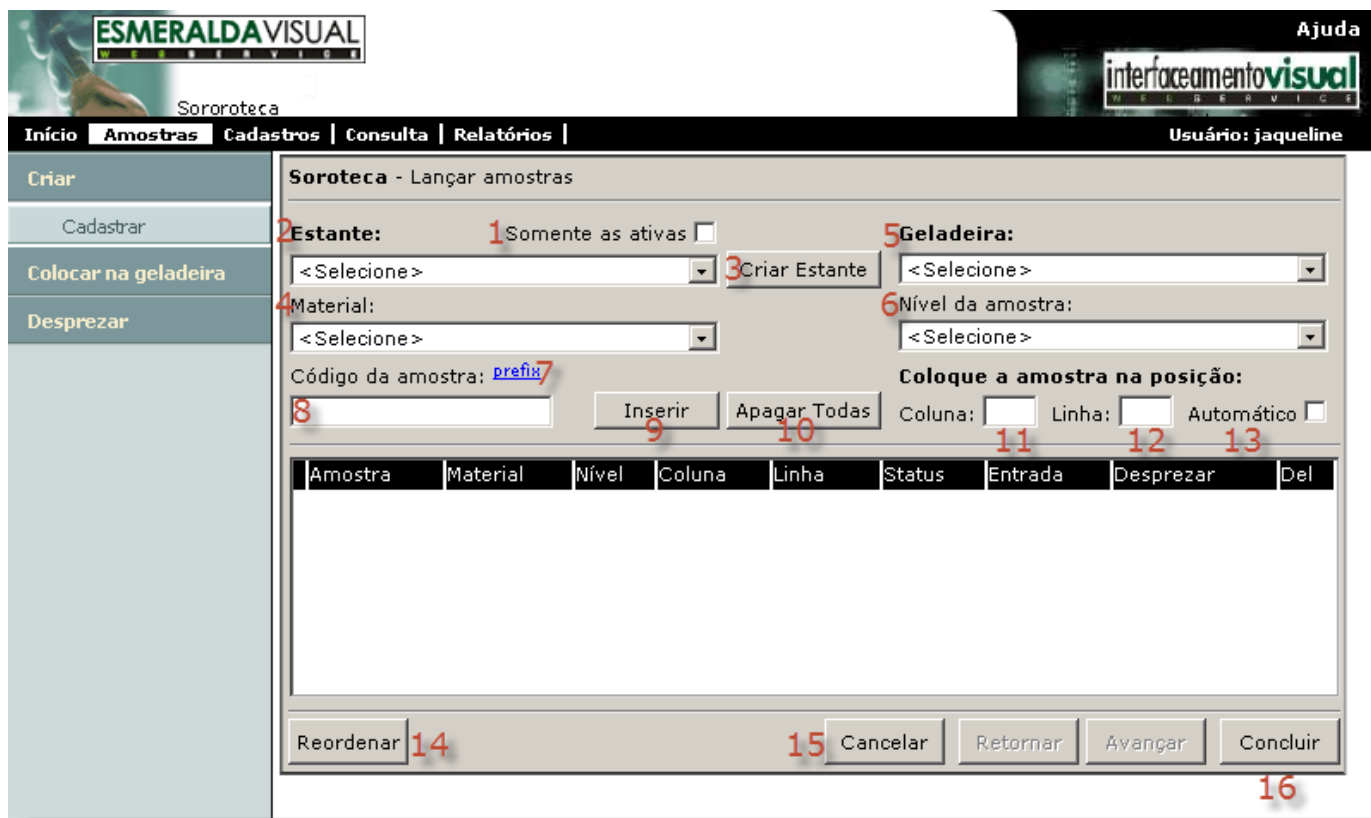

- 1) **Somente as ativas:** Marcar este check box para que na listagem de estantes sejam exibidas somente as estantes ativas.
- 2) **Estante:** Selecionar a estante que desejar armazenar a amostra.
- 3) **Criar Estante:** Clicar para criar uma nova estante.
- 4) **Material:** Selecionar o tipo material que compõe as amostras que estão sendo armazenadas.
- 5) **Geladeira:** Selecionar a geladeira que a estante será armazenada contendo as amostras.
- 6) **Nível da Amostra:** Selecionar o nível de amostra contida no tubo de coleta.
- 7) **Prefixo:** Utilizado para o lançamento manual das amostras. O prefixo memoriza os dígitos iniciais da amostra, não havendo necessidade de preenchê-la manualmente, desta forma será necessário preencher manualmente somente os dígitos finais da amostra.
- 8) **Código da amostra:** Utilizar o leitor de código de barras ou preencher manualmente o código da amostra que está sendo armazenada.
- 9) **Inserir:** Clicar para inserir a amostra informada ou teclar "enter".
- 10) **Apagar Todas:** Clicar para apagar todas as amostras colocadas na estante.
- 11) **Coluna:** Campo utilizado para definir manualmente o posicionamento do tudo na estante.
- 12) **Linha:** Campo utilizado para definir manualmente o posicionamento do tudo na estante.
- 13) **Automático:** Marcar este check box para que o próprio sistema posicione a amostra na estante automaticamente.
- 14) **Reordenar:** Clicar para reordenar a lista para facilitar a operação de colocar manualmente a amostra na estante.
- 15) **Cancelar:** Clicar para cancelar a operação.
- 16) **Concluir:** Clicar para concluir o procedimento.